




# ASPIJECT®

Selvspirerende injektionsinstrument  
til infiltrationer og ledningsanalgesi


## BRUGERVEJLEDNING

### BRUGERVEJLEDNING


1.  
Skrue en standard dentalkanyle på sprøjten.

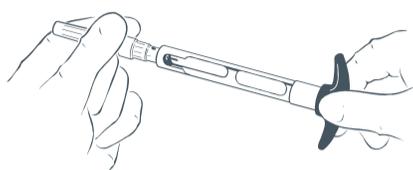


2.  
For at undgå en skæv (ikke centreret) perforering af tubulens gummimembran, som ville kunne forårsage en lækage af væske fra tubulen under injektionen, ilægges tubulen med tubulens bagerste ende først.

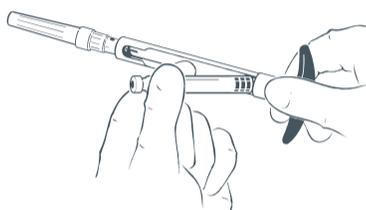


3.  
Skub tubulen helt frem i sprøjten så kanylen perforerer gummimembranen i tubulen – hold øje med at kanylen penetrerer midt i membranen.

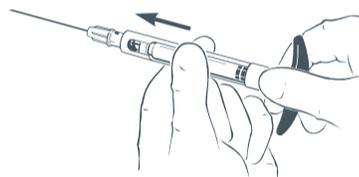

4.  
"Passiv" aspiration foretages ved et kort tryk på stempelstangen hvorved tubulens gummimembran kortvarigt bliver deformeret af den lille studs der sidder i sprøjtes forreste del – aspiration opstår når tubulens gummimembran springer tilbage og skaber et lille undertryk i tubulen.  
(Aspirationsfunktionen er afhængig af gummimembranens elasticitet hvorfor ikke alle tubuler er lige velegnede til brug for "passiv" aspiration)

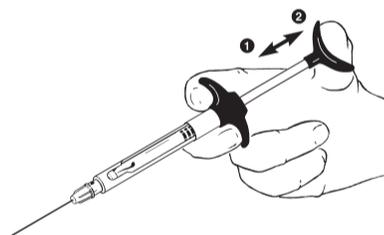

5.  
Efter injektionen skubbes tubulen helt tilbage i sprøjten hvorefter den brugte tubule let lader sig fjerne fra sprøjten, enten ved bare at vende sprøjten med sprøjtes åbningsside nedad, eller ved med en finger at løfte tubulen op fra sprøjten.

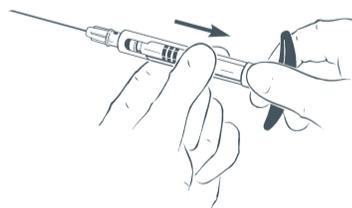

### RENGØRING OG STERILISATION

Sprøjten rengøres grundigt med vand og sæbe efter brug. Bedøvelsesmidler indeholder megen syre og alle rester bør derfor fjernes inden sterilisering for at undgå misfarvninger på stålets overflade.

Skyl grundigt inden autoklavering.

Steriliseres i autoklave ved max. 200°C.

### GARANTI

ASPIJECT® er dækket af 5 års garanti på materiale- og konstruktionsfejl. Skader opstået ved utilstrækkelig pleje eller u hensigtsmæssig håndtering er ikke dækket af garantien.

### PRODUCENT

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danmark  
Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98  
E-mail: [export@ronvig.com](mailto:export@ronvig.com) · [www.ronvig.com](http://www.ronvig.com)

